

GENERATOR PARY

SV 2900 – SV 2900KIT

DANE TECHNICZNE

- Kocioł
 - pojemność 3.5 L
 - materiał / jakość stal nierdzewna 316L
 - ciśnienie pary 5 bar
 - temperatura pary 150°C
 - urządzenie samo-napełniające tak
 - odpływ pary 0 do 130 gr/mm
- Moc elektryczna
 - napięcie 230v – 50/60Hz
 - kocioł 2850w
 - wewnętrzny, demontowany i antykorozyjny
 - moc całkowita 2850w
- Pojemność zbiorników
 - zbiornik na wodę do produkcji pary 6 L
 - dodatkowy zbiornik na wodę lub detergent 2,5L
 - filtr na zbiornikach na wodę i na detergent tak
 - filtr na wyjściu pary tak
- Magnetyczny system zabezpieczenia przed kamieniem tak
- Ochrona elektryczna
 - produkt IP 44
 - wodoodporna skrzynka elektroniczna i elektryczna IP 56
- Waga / wymiary
 - wąż parowy STD 5 m
 - kabel elektryczny w osłonie neopronowej 10 m
 - produkt 19 Kg
 - wymiary D 50 x S 36 x W 41,5 cm
- Materiał ABS / stal nierdzewna 304
- Homologacja / atestacja
 - CE wyroby medyczne LNE –GMED 0459
 - SANIVAP posiada : ISO 13485 : 2004
 - ISO 9001 : 2008
- Gwarancja : 1 rok (części / koszty pracy i transportu lub lokalnych napraw przez akredytowanego technika)
- Wąż i akcesoria nie są objęte gwarancją



SV 2900 KIT

System parowy SV 2900 zapewnia całkowite czyszczenie i dezynfekcję wszelkiego rodzaju powierzchni: podłogi, powierzchnie pionowe, meble, wyposażenie, wyroby medyczne ... Stała jakość pary SV2900 zapewnia jego skuteczność w zakresie czystości i dezynfekcji. SV 2900 jest przeznaczony do intensywnej pracy **do 8 godzin dziennie**. System parowy SV 2900 jest ergonomiczny, łatwy w obsłudze i doskonale nadaje się do codziennego użytku, zgodnie z protokołami SANIVAP. Szeroki zakres elastycznych akcesoriów zapewnia skuteczność i wszechstronność jego działania.

JAKOŚĆ PARY

□ Koncepcja kotła

- Wewnętrzny, demontowany i odporny na korozję
- Materiał wysokiej jakości (316L austenityczna stal nierdzewna)
- Magnetyczny system samo-napełniania
- Mocna izolacja kotła
- Zoptymalizowane wskaźniki wydajności kotła :
moc / ciśnienie / wylot pary



□ Koncepcja układu płynów

- Elektroniczne monitorowanie ciśnienia pary i temperatury, zapewniające skuteczność dezynfekcji.
- Regulacja mocy pary - 6 poziomów
- Zawór pary ze stali nierdzewnej chroniący elektrozawór
- Samo-napełniający się stykownik magnetyczny
- Magnetyczny system zapobiegania powstaniu kamienia
- Filtr do zbiornika wody
- Filtr do zbiornika na detergent
- Spust z kotła za pomocą mosiężnych śrub


JAKOŚĆ PRODUKTU

□ Jakość materiału

- Konstrukcja i elementy ze stali nierdzewnej 304
- Wzmocnione nieodeformowalne zbiorniki polietylenowe
- Kocioł ze stali nierdzewnej 18/10, jakości AISI 316L
- Koła wysokiej jakości

□ Bezpieczeństwo

- Urządzenie w pełni chronione - IP 44
- Wodoodporna skrzynka elektryczna i elektroniczna - IP 56
- Przewód elektryczny w neoprenie 10m (3x2,5)
- Alarm : brak wody zasilania kotła
- Alarm : brak dodatkowej wody lub detergentu
- Wymuszany wtrysk wody lub detergentu

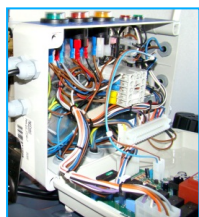

IP 56 skrzynka elektryczna



panel sterowania

PROTOKOŁY I SZKOLENIA

- Szkolenie dla użytkowników urządzeń parowych i regularna konserwacja
- Odpowiednie protokoły do dyspozycji

POMOC TECHNICZNA

- Pomoc techniczna dla użytkowników, dla optymalnego wykorzystania systemu parowego
- Dostępność umów serwisowych
- Usługi posprzedażowe świadczone przez akredytowane sieci krajowe

GAMA AKCESORIÓW

- Wieloletnie doświadczenie SANIVAP pozwoliło stworzyć szeroką gamę ergonomicznych akcesoriów do protokołów czyszczenia i dezynfekcji.
- Gama akcesoriów technicznych SANIVAP do stosowania z mikrofibrą optymalizuje wydajność systemu parowego

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SV2900 :

Elastyczny wąż parowy 5 m
Zbiornik napełniania
Klucz spustowy – zestaw uszczelek

SV2900KIT :

Idem SV2900
+ wózek do biocyszczczenia SV800
+ zestaw akcesoriów:
SV90+ SV100 + SV120 + SV150 +
+ MV1410 + MV1404 +

SPPV89931



SV150 : MOP parowy
MV1410 : MOP do podłóg



SV 90 : wygięta dysza parowa
SPPV89931 : szczotka
dyszowa



SV 100 : Szczotka MOP 30cm
MV 1404: MOP do powierzchni



SV 120 : Szczotka 20cm
do wys. temperatur